

PREMIUM DENTAL PRODUCTS

PRODUKT KATALOG

Das komplette Sortiment an
Cavex Premiumprodukten



Edition
2026
DEUTSCH

YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

PREMIUM ALGINATE SYSTEM

DIE BESTEN ALGINATE WELTWEIT

Durch Fakten belegt, von Zahnärzten bestätigt



YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

ÜBER UNS

Cavex entwickelt und produziert seit 1908 aktiv Lösungen für die Dentalbranche. Jedes neue Produkt ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Forschung und Entwicklung, geltenden Vorschriften, Produktion, Marketing, Vertrieb und Logistik, die es Cavex ermöglicht, qualitativ hochwertige, neue Produkte zu entwickeln.

HERSTELLER FÜR DENTALPROFIS SEIT 1908

Mit Haarlem als ständiger Heimatbasis erfindet und fertigt Cavex seit 1908 innovative Lösungen für die Dentalbranche. Seitdem sind wir als Hersteller von Spitzenprodukten mit garantierter Qualität bekannt. Entdecken Sie hier, wo die Geschichte von Cavex begann und wie zwei ehrgeizige Haarlemer Apotheker den Grundstein für einen der größten Dentalhersteller der Welt legten.

APOTHEKER KEUR & SNETLTJES

1908 gab es nur eine Lösung bei Defekten – die Zahnextraktion. Die Haarlemer Apotheker Keur und Sneltsjes dachten, dass die Extraktion für Patienten unter örtlicher Betäubung viel angenehmer gestaltet werden könnte. Und so war das erste Dentalprodukt geboren: Selectocaine Anästhetikum.

'CAVEX SILBER AMALGAME'

Mit der Zunahme der verfügbaren Materialien verlagerte sich das Behandlungsziel von der Extraktion hin zur Konservierung und Restauration. Die Firma Keur & Sneltsjes entwickelte u.a. revolutionären Füllstoff: Amalgam. Nun gehören Kavitäten im Zahn der Vergangenheit an. Später teilte sich das Unternehmen in Keur & Sneltsjes und 'Cavex Holland' auf.

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

Mittlerweile sind wir zu einem führenden Hersteller in der Dentalwelt herangewachsen. Mit zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Produkten helfen wir Zahnärzten, ihre tägliche Arbeit so gut wie möglich zu erledigen. Cavex ist aber auch für den Patienten da. Mit effektiven und sicheren Lösungen im Bereich Halitosis und Whitening unter dem Motto „Your Impression Is Our Specialty“, sorgen wir dafür, dass der Anwender immer einen hervorragenden Eindruck vermittelt. Dieser starke Antrieb hat uns seit der Einführung des CA37-Alginats in mehreren Bereichen zum Maßstab gemacht.

DIE KRAFT DER ZUSAMMENARBEIT

Für die Entwicklung neuer Produkte, aber auch zur Perfektionierung bestehender Produkte, pflegen wir engen Kontakt zu Zahnärzten, Universitäten und wichtigen Meinungsbildnern. Auf diese Weise bleibt Cavex ein Spitzenreiter in der Dentalbranche und wir bleiben fleißig dabei, Zahnärzte weltweit bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.

DAS GEHEIMNIS VON CAVEX

Das erfahrene Team aus gut ausgebildeten Mitarbeitern ist der Schlüssel zu unserem weltweiten Erfolg. Die Dentalwelt verändert sich schnell und die Fachleute bei Cavex passen sich ebenso schnell an. Dabei pflegen wir ganz besonders die engen Partnerschaften mit Händlern auf der ganzen Welt. Wir liefern die besten Produkte und unterstützen sie mit Werbeaktionen und legen Wert auf hervorragende Produktschulungen.

Wir legen Wert auf die Meinung des Zahnarztes. Deshalb lassen wir unsere Produkte regelmäßig von „The Dental Advisor“, testen. Nach klinischen Bewertungen durch ein großes Team von Zahnärzten erhalten die getesteten Produkte eine Punktzahl von bis zu fünf Pluspunkten. Mehrere Cavex-Produkte, einschließlich Cavex Cream Alginate, Cavex ColorChange und das Cavex Bite&White ABC Masterkit erhielten sehr gute Bewertungen. Cavex Cream selbst erreichte mehrere Jahre in Folge die Auszeichnung „Top Award Winner“.



CAVEX CREAM ALGINAT



Die neueste Ergänzung des Cavex-Alginat Sortiments ist das Cavex Cream Alginat. Mit einer Detailwiedergabe von 5 µm in Kombination mit der hohen Reißfestigkeit und Elastizität kommt dadurch eine Qualität, vergleichbar mit Silikon, zustande. Diese Eigenschaften, verstärkt durch die schnelle Wasseraufnahme und cremige Konsistenz beim Mischen, die SnapSet-Eigenschaft und die Lagerfähigkeit von fünf Jahren machen es zu einem unvergleichlichen Produkt.

Der angenehme Kaugummi-Duft des Alginatabdrucks nimmt den Bisswiderstand beim Patienten. Cavex Cream Alginat ist verfügbar in Normal Set (90 Sek.) und Fast Set (60 Sek.).

Produktmerkmale

- Detailwiedergabe von 5 µm
- einfach zu mischen
- hochelastisch
- hohe Reißfestigkeit

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
AA600	Cavex Cream Alginat NS	20 x 500 gr
AA605	Cavex Cream Alginat FS	20 x 500 gr

CAVEX COLORCHANGE



Benutzerfreundliches Alginat mit visuellem Indikator. Das Produkt gehört zur jüngsten Generation der Cavex Alginat. Farbänderungen geben die Phasen der Aushärtung an.

So ändert sich die Farbe des Alginats während des Mischens von violett nach rosa. Dann ist die Mischzeit vorbei. Beim Aushärten verfärbt es sich von rosa zu weiß. Dann ist das Alginat ausgehärtet und der Abdrucklöffel kann aus dem Mund des Patienten genommen werden. Nach dreißig Minuten ist das Alginat vollständig ausgehärtet und verfärbt sich wieder rosa.

Produktmerkmale

- drei Farbwechsel
- kurze Aushärtezeit (60 Sek.)
- sehr elastisch
- hohe Verträglichkeit mit Gips

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
AA323	Cavex ColorChange	20 x 500 gr

CAVEX IMPRESSIONAL

Cavex Impressional ermöglicht Alginatabdrücke mit Präzision bis ins letzte Detail. Das Alginat hat eine einzigartige Kombination von sehr hoher Elastizität, Reißfestigkeit und Detailgenauigkeit (25 µm). Dadurch ist das Alginat besonders geeignet um mit Modellguß und/oder starken Hinterschneidungen zu arbeiten.

Cavex Impressional ist in Normal Set (90 Sek.) und Fast Set (60 Sek.) erhältlich. Die kurze Abbindezeit in Kombination mit dem Spearmint-Aroma machen die Behandlung besonders angenehm.

Produktmerkmale

- maximale Elastizität und Reißfestigkeit
- leicht lesbare blaue Farbe
- ideal für die Alginat-Hydrokolloid-Technik
- optimale Verträglichkeit mit Gips

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
AA096	Cavex Impressional NS	20 x 500 gr
AA097	Cavex Impressional FS	20 x 500 gr



CAVEX ORTHOTRACE

Cavex Orthotrace ist eine Alginatabdruckmasse mit einem natürlichen Fruchtaroma für die Kieferorthopädie. Das Produkt wurde speziell nach den Bedürfnissen der Kieferorthopäden entwickelt. Dementsprechend enthält Cavex Orthotrace viele Eigenschaften, die die Behandlung für Patienten und Praxen angenehmer machen.

Cavex Orthotrace hat eine besonders schnelle Aushärtezeit, damit das Alginat nicht im Mund verläuft. Dadurch vermindert Cavex Orthotrace den Würgereflex beim Patienten. Zudem lädt die angenehme Duft- und Farbkombination zum reinbeißen ein.

Produktmerkmale

- extra schnelle Aushärtung
- angenehmes Fruchtaroma
- sehr elastisch
- leicht lesbare rosa Farbe

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
AA380	Cavex Orthotrace	20 x 500 gr



CAVEX CA37



Cavex CA37 ist ein Allround-Alginat, das täglich von zehntausenden Zahnarztpraxen weltweit verwendet wird. Es ist das erste Alginatabdruckmaterial überhaupt, welches zum weltweiten Standard geworden ist.

Dieses robuste Alginat ist in Normal Set (90 Sek.) und Fast Set (60 Sek.) erhältlich. Diese kurze Aushärtezeit macht die Behandlung für den Patienten angenehmer, ebenso wie das angenehme Pfefferminzaroma.

Auch für prothetische Arbeiten ist das Cavex CA37 sehr gut geeignet.

Produktmerkmale

- reiß- und formbeständig
- Pfefferminzaroma
- rosa Farbe
- kompatibel mit allen Arten von Gips

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
AA075	Cavex CA37 NS	20 x 500 gr
AA055	Cavex CA37 NS	24 x 453 gr
AA025	Cavex CA37 FS	20 x 500 gr
AA035	Cavex CA37 FS	24 x 453 gr



YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX ALGINAT MIXER II

Mit dem Cavex Alginat Mixer II bekommen Sie auf Knopfdruck ein perfekt gemischtes Alginat.

Das Anmischen per Hand erfordert Geschick, Zeit und Erfahrung. Daher kann es schwer sein, einen guten Abdruck zu bekommen. Der Cavex Alginate Mixer II bietet gleichbleibende Qualität und daher vorhersehbare Abdrücke in nur ein paar Sekunden.

Produktmerkmale

- hygienisch
- einfach zu bedienen
- einfach zu säubern
- gleichbleibende homogene Masse
- robust



Art. Nr. Bezeichnung

Cavex Alginate Mixer II, 4 x Mischbecher, Spatel, Rührstab, Wasserdosierflasche, Halter für Zubehör

AT520 inkl. 10 x 500 gr Cavex Cream NS

AT521 inkl. 10 x 500 gr Cavex CA37 NS

AT522 inkl. 10 x 500 gr Cavex Impressional NS

AT523 inkl. 10 x 500 gr Cavex ColorChange

AT524 inkl. 10 x 500 gr Cavex Orthotrace

Zubehör Cavex Alginat Mixer

AT530 Mischbecher für Cavex Alginat Mixer II 1 Stück

AT550 Mischbecher für Cavex Alginat Mixer 3 1 Stück

AT511 Spatel für Cavex Alginat Mixer 1 Stück

AT513 Rührstab für Cavex Alginat Mixer 1 Stück

CAVEX ALGINAT ZUBEHÖR

Verschiedene externe Faktoren können die Qualität des Alginateabdrucks beeinflussen. Wichtige externe Faktoren sind Wassertemperatur, Mischverhältnis, Mischtechnik und Lagerbedingungen.

Um immer wieder konsistente Ergebnisse zu erzielen ist es wichtig, die externen Faktoren so weit wie möglich zu optimieren und zu standardisieren. Um das zu erleichtern, hat Cavex folgendes Alginat-Zubehör entwickelt. Damit steht einem perfekten Abdruck nichts mehr im Wege.



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
AT021	Cavex Wasserdosierflasche	1 Stück
AT041	Cavex Mischbecher blau	1 Stück
AT042	Cavex Anmischspatel aus Kunststoff	1 Stück
AT040/043	Cavex Plastikbehälter (Box + Deckel)	1 Stück
AT076-01	Cavex Pulverlöffel + Wasserdosierung	1 Set
AT076	Cavex Pulverlöffel + Wasserdosierung	50 Sets
AT240	Cavex Alginatcontainer blau	1 Stück
AT260	Cavex Alginatcontainer pink	1 Stück



YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX IMPRESAFE



Hygiene in der Zahnarztpraxis und dem Labor sind unerlässlich. Deswegen hat Cavex ein schnelles, sicheres und sehr wirksames Abdruckdesinfektionsmittel entwickelt: Cavex ImpreSafe.

In nur drei Minuten tötet das revolutionäre Desinfektionsmittel mindestens 99,99 % aller Bakterien, Pilze und Viren, einschließlich des Coronavirus ab. Es ist ein komplettes System für die Zahnarztpraxis.

Es besteht aus:

- einer Desinfektionswanne
- einem Liter Desinfektionsmittelkonzentrat
- einem digitalen und magnetischem Timer
- 50 Zip-Beuteln

Produktmerkmale

- schnell und effizient
- Konzentrat 3%
- aldehydfrei
- vollständiges System
- zuverlässig und sicher
- angenehmer Duft



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
HA053	Cavex ImpreSafe Starterkit Cavex ImpreSafe 1000 ml, Container, Timer, 50 Zip-Beutel	1 Stück
HA050-01	Refill Cavex ImpreSafe	1.000 ml
HA050	Cavex ImpreSafe Refill pack	6 x 1.000 ml
HT020	Cavex ImpreSafe Desinfektionswanne	1 Stück
HT025	Cavex ImpreSafe Zip-Beutel	60 x 50 Stück

CAVEX GRENCLEAN

Entfernen Sie Alginat- und Gipsreste schnell und einfach mit Cavex GreenClean. Wer kann einen besseren Alginatlöser herstellen als die Macher von dem „besten Alginat der Welt“?

Cavex GreenClean ist eine intelligente Lösung für Abformlöffel, Instrumente und andere Zubehörteile. Ohne Kratzen und Schleifen, lassen sich Überreste entfernen. Einfach 15-30 Minuten eintauchen, mit Wasser abspülen und die sauberen, glänzenden

Abdrucklöffel und das Zubehör sehen aus wie neu!

Produktmerkmale

- pH-neutral
- hautfreundlich
- biologisch abbaubar
- 1 kg für mehr als 500 saubere Löffel
- frischer Zitrusduft



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
HA001	Cavex GreenClean Behälter	1 kg

CAVEX ALGINATE ADHESIVE



Cavex Alginate Adhesive optimiert sowohl den mechanischen, als auch den chemischen Verbund zwischen dem Abdrucklöffel und dem Alginat. Das Produkt verhindert, dass sich die Abdruckmasse vom Abdrucklöffel löst, wenn dieser aus dem Mund des Patienten entfernt wird.

Cavex Alginate Adhesive lässt sich dank des Pinsels in der Kappe und der auffälligen blauen Farbe des Materials einfach auftragen.

Produktmerkmale

- speziell für die Verwendung mit Alginat entwickelt
- für Abdrucklöffel aus Metall und Kunststoff geeignet
- sehr einfach anzuwenden
- keine besonderen Belüftungsmaßnahmen erforderlich
- mindestens 50 Anwendungen pro Flasche
- Rückstände können leicht mit Isopropylalkohol oder Ethanol (95%) entfernt werden

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
AB010	Cavex Alginate Adhesive	2 x 14 ml

CAVEX SCANSPRAY



Cavex ScanSpray wurde dazu entwickelt die Scanbarkeit von Alginatabdrücken zu optimieren. Beim Hinzufügen von Titandioxid sind selbst die kleinsten Details deutlich lesbar. Das Spray ist ein Pulver, wodurch es für alle Typen von Abdruckmaterialien geeignet ist.

Produktmerkmale

- für ein hochdetailliertes digitales Modell des Abdrucks
- geeignet für alle Arten von Abdruckmassen
- auf Pulverbasis statt auf Ölbasis
- für 300 Abdrücke

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
AT001	Cavex ScanSpray	1 x 200 ml



CAVEX VACUFORMER SYSTEM

Das Cavex VacuFormer-System ist ein komplettes Vakuum-Thermoformsystem. Es besteht aus dem Cavex VacuFormer, Tiefziehfolien, einem einzigartigen Verbundgips und Zubehör.

Der VacuFormer ist ein Allround-Thermal-Vakuumformer ohne Schnickschnack. Diese robuste Maschine verfügt über einen elektrischen Hochleistungs-Vakuummotor, der für alle herkömmlichen dentalen Tiefzieh Anwendungen geeignet ist.

Der Cavex VacuFormer ist einfach zu bedienen und gegen Überhitzung geschützt. Er ist ein „no-nonsense“ Allround-Thermal-Vakuumformer zur Herstellung von Schienen, individuellen Zahnaufhellungsschienen und Mundschutz. Das Starter Kit besteht aus allen Geräten und Materialien, die benötigt werden, um gebrauchsfertige Tiefziehschienen herzustellen.



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
VF001	Cavex VacuFormer Starterkit 12 Cavex Mouth Protector Transparent 3,8 mm 25 Cavex Bleach Heavy Transparent 1,5 mm 1 Schere & Gebrauchsanweisung 20 Sets Instant Stone mit Aktivator	1 Stück
VT036	Cavex Mouth Protector Transparent 3,8 mm	12 Schienen
VT033	Cavex Mouth Protector X-pro Transparent 5 mm	12 Schienen
VT028	Cavex Splint+ Transparent 1,0 mm	25 Schienen
VT026	Cavex Splint X-Heavy Transparent 1,5 mm	25 Schienen
VT022	Cavex Bleach Transparent 1,0 mm	25 Schienen
VT030	Cavex Bleach Heavy Transparent 1,5 mm	25 Schienen
VT027	Cavex Bruxism 2,0 mm	25 Schienen



CAVEX INSTANT STONE

Viele Zahnarztpraxen haben keinen separaten Bereich zum Ausgießen von Abdrücken. Außerdem haben nur wenige einen (Vakuum-) Gipsmischer. Cavex Instant Stone ist ein Verbundgips und in nur 15 Minuten kann ein perfektes Modell für (Bleaching-) Schienen und Mundschutz gegossen werden. Behandlungen, die normalerweise mehrere Zahnarztbesuche erfordern, können jetzt in einer Sitzung durchgeführt werden.

Cavex Instant Stone verbessert sowohl die Produktivität der Praxis als auch die Patientendienstleistungen.

Produktmerkmale

- einzigartiger Verbundgips, um in nur 15 Minuten ein perfektes Gipsmodell herzustellen
- Dank eines ausgeklügelten Mischsystems ist Cavex Instant Stone sehr sauber und benutzerfreundlich



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
VT012	Cavex Instant Stone mit Aktivator	20 Sets

CAVEX DISPOTRAYS



Hygienische Einweg-Trays für den Einsatz in Kombination mit dem Standard-Tray. Das Tablett kann einmalig verwendet werden und ist ideal zum Aufbewahren bzw. zur Aufbereitung von Instrumenten in der Zahnarztpraxis.

Produktmerkmale

- Typgröße: 18 x 28 cm
- (umweltfreundlich) Hergestellt aus Polystyrol
- passt perfekt in die Standardablage

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
HA061	Cavex Dispotrays (18 x 28 cm), Box 8 x 50	400 Stück



YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX OUTLINE

Cavex Outline ist eine spezielle Abformpaste, entwickelt für die präzise Abformung von Zahnprothesen. Die Abdruckpaste ist frei von Eugenol, damit der Patient kein stechendes oder brennendes Gefühl bei Kontakt verspürt.

Prothesen müssen sich gut an die Schleimhäute im Mund anpassen. Cavex Outline wurde speziell für diesen Zweck entwickelt. Die Abformpaste ist nicht elastisch und fließt unter leichtem Druck.

Dadurch ergibt sich eine sehr genaue Abformung des Weichteilgewebes.

Produktmerkmale

- ideale Konsistenz
- eugenolfrei
- nicht elastisch
- blaue Farbe
- klebt nicht
- natürlicher, angenehmer Duft
- Lagerfähigkeit von drei Jahren



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
AP030	Cavex Outline	
	weiße Paste	1 x 140 gr
	blaue Paste	1 x 65 gr
	Anmischblock	1 Stück

CAVEX SILICONA & SILICONA BITE

Cavex SiliconA ist ein speziell ausgewähltes System aus überlegenen Silikonmaterialien. Auch unter feuchten Bedingungen wird ein Abdruck perfekt. Cavex SiliconA hat die nützliche Eigenschaft, nicht zu kleben. Das macht es sehr einfach zu handhaben.

Kombinieren Sie dieses Produkt mit Cavex SiliconA bite. Dieses benutzerfreundliche Bissregistrierungsmaterial ist besonders genau und hat eine kurze Verarbeitungs- und Abbindezeit.

Cavex SiliconA bite sorgt immer wieder für besonders gute Bissregistrierungen.

Produktmerkmale

- benutzerfreundlich
- 100% genau
- klebt nicht
- langzeit formstabil
- äußerst detaillierte Wiedergabe
- ideale Aushärtezeit
- Thixotrop, fließt unter leichtem Druck
- Lagerfähigkeit von drei Jahren



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
AS40	Cavex SiliconA Soft Putty (gelb)	2 x 250 ml
AS52	Cavex SiliconA Heavy Body (grün)	2 x 50 ml
AS53	Cavex SiliconA Injection Type (blau)	2 x 50 ml

Cavex SiliconA Zubehör

AS70	Cavex SiliconA Dispensing gun	1 pce
AS94	Cavex SiliconA Injection - tips, gelb	48 Stück
AS95	Cavex SiliconA Heavy Body - tips, grün	48 Stück
AS96	Cavex SiliconA Injection - intra-oral tips, gelb	96 Stück
AS97	Cavex SiliconA Heavy Body - intra-oral tips, weiss	96 Stück
AS54	Cavex SiliconA Bite	2 x 50 ml



CAVEX BITE&WHITE SHADE CORRECTION STARTER PACK



**MEDIZIN
PRODUKT**

Cavex Bite&White Shade Correction ist ein schnelles, sicheres und effektives System zur Wiederherstellung der natürlichen Zahnfarbe des Patienten. Es handelt sich um ein In-Office-System. Der gesamte Eingriff wird vom Zahnarzt in der Zahnarztpraxis durchgeführt. Das revolutionäre Gel im System ermöglicht die Wiederherstellung der ursprünglichen Zahnfarbe in nur 2-3 Anwendungen während einer Sitzung.

Aufgrund der einzigartigen Formel wirkt das Gel sehr schnell.

Dies minimiert die Behandlungszeit und damit das Risiko einer Überempfindlichkeit. Die thermoreversiblen Eigenschaften des Gels sorgen dafür, dass es während der Behandlung perfekt an Ort und Stelle bleibt, was das Endergebnis maximiert. Das System besteht aus einem einzigartigen Applikatorstift mit einer Bürste für maximale Kontrolle während des Auftrags und einer Schutzbarriere zum Schutz des umgebenden Weichgewebes.


Produktmerkmale

- einfaches Auftragen mit dem Pinselaufsatz
- sehr schnelle Ergebnisse
- enthält 25 % Wasserstoffperoxid Superior
- Ergebnis in nur 2-3 Anwendungen während einer Sitzung
- kann bei Raumtemperatur gelagert werden
- markante blaue Farbbarriere


Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW053	Cavex Bite&White Shade Correction HP25 starter pack	
	Whitening pen	2 x 2 ml
	Barrier Spacer	1 x 1 gr
	Application tip	5 Stück



Bei der ersten Anwendung sollte darauf geachtet werden, genügend Gel bis zur ersten Dosierlinie aufzutragen.

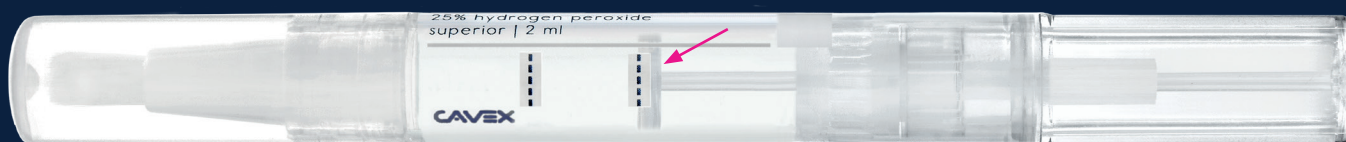

Beginnen Sie mit der zweiten Anwendung und verwenden Sie das Aufhellungsgel bis zur zweiten Dosierlinie.

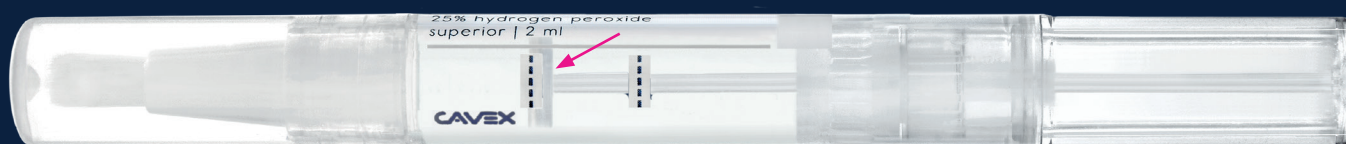

Beginnen Sie mit der dritten Anwendung und verwenden Sie den Rest des Aufhellungsgels.

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX BITE&WHITE SHADE CORRECTION PEN BULK PACK



**MEDIZIN
PRODUKT**


Eine Großpackung mit 12 Stiften für
In-Office Anwendungen.

Das Gel basiert auf der 25% Hydrogen
Peroxide Superior (HPS)-Technologie.

Der Cavex Bite&White Shade Correction Pen
enthält einen Pinsel-aufsatz, der das Auftra-
gen auf die Zähne erleichtert und maximale
Kontrolle während des Auftrags bietet.

Produktmerkmale

- einfaches Auftragen mit dem Pinselaufsatz
- kann mit einfacher Handhabung durch
Drehen der Stiftrückseite dosiert werden
- das thermoreversible HPS-Gel bleibt
perfekt an Ort und Stelle
- gebrauchsfertig, kein Mischen erforderlich
- kann bei Raumtemperatur gelagert werden
- enthält 25 % Wasserstoffperoxid Superior

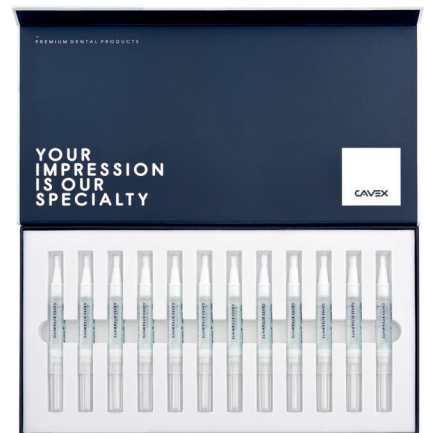

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW054	Cavex Bite&White Shade Correction Pen Bulk Pack	
	Whitening pen	12 x 2 ml

CAVEX BITE&WHITE SHADE CORRECTION BARRIER BULK PACK

Großpackung mit 3 Barrieren/Abstandshal-
tern, um den Kontakt mit Weichgewebe zu
verhindern und Bereiche abzuschirmen,
die nicht mit dem Gel in Kontakt kommen
sollten.

Die Barriere lässt sich mit den mitgelieferten
Applikationsspitzen einfach auftragen und ist
innerhalb von 20 Sekunden mit einer Poly-
merisationslampe ausgehärtet. Danach lässt
sie sich leicht entfernen.


Produktmerkmale

- nach der Behandlung leicht entfernbar
- Aushärtezeit von 20 Sekunden
- markante blaue Farbe

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW055	Cavex Bite&White Shade Correction Barrier Bulk Pack	
	Barrier Spacer	3 x 1 gr
	Application tip	10 Stück



CAVEX BITE&WHITE ABC MASTERKIT

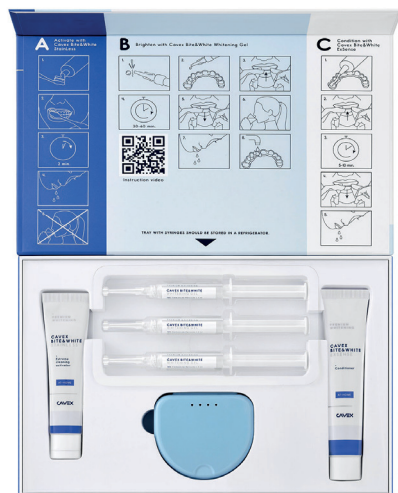

In drei einfachen Schritten sorgt das Cavex Bite&White ABC Masterkit für eine sehr effektive, sichere und vor allem sorgenfreie Bleaching-Behandlung. Das ABC Masterkit sticht auch durch eine professionelle Verpackung mit klaren Anweisungen heraus. Zudem können Patienten bei YouTube unterstützendes Videomaterial finden.

Die Spritzen befinden sich in einem herausnehmbaren Tray, da die Spritzen so separat im Kühlschrank gelagert werden können. Das 3 x 3 ml Bleaching-Gel ist ausreichend für eine Behandlung von 15 Tagen. Wenn der Patient vorher bereits zufrieden ist, können die wiederverschließbaren Spritzen auch später noch zum Nachbessern genutzt werden.

Mit StainLess aktivieren

Reinigen Sie die Zähne zunächst gründlich mit Cavex Bite&White StainLess. Die Paste erhöht den pH-Wert im Mund leicht, damit das Mittel noch besser wirkt.



Bleaching mit Bleichgel

Das Bleichgel enthält 16 % Carbamidperoxid was 6% Wasserstoffperoxid entspricht. Platzieren Sie auf jedem Element der Schiene einen Tropfen Gel. Tragen Sie die Schiene nun 30-60 Minuten, um optimale Bleaching-Ergebnisse sicher und schnell zu erzielen. Cavex Whitening Gel hat sich als wirksam erwiesen.

Konditionierung mit ExSense

Nach dem Bleaching folgt die Nachpflege in Form von Cavex Bite&White ExSense. Nutzen Sie die Schiene erneut, um das Gel 5 - 10 Minuten wirken zu lassen. Es remineralisiert die Zähne, füllt die Tubuli und Mikrorisse und beugt somit Sensibilisierung vor.

Produktmerkmale

- eine mehrtägige Aufhellungsbehandlung unter (einmaliger) Aufsicht des Zahnarztes
- maximales Ergebnis mit minimaler Empfindlichkeit
- professionelle Verpackung mit klarer Anleitung
- 3 x 3 ml Bleaching-Gel ist ausreichend für 15 Tage Aufhellung
- Zähne bleiben mindestens 2,5 bis 3 Jahre heller

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW090	Cavex Bite&White ABC Masterkit Cavex Bite&White StainLess, Tube Cavex Bite&White refill, Spritze Cavex Bite&White ExSense, Tube Aufbewahrungsbox, Farbschlüssel und Bedienungsanleitung	1 x 35 ml / 50 gr 3 x 3 ml 1 x 42 ml / 50 gr
BW010	Cavex Bite&White Spritze	1 x 3 ml
BW015	Cavex Bite&White Bulk Refill Pack	10 x 3 ml



YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX BITE&WHITE 3 SYRINGES



Das kompakte und budgetfreundliche Cavex Bite&White 3 Spritzenpaket enthält drei Spritzen mit Cavex Bite&White Aufhellungsgel. Die Menge ist ausreichend für eine 15-tägige Aufhellungsbehandlung. Cavex Bite&White 3 Spritzen ist die perfekte Lösung, um die Aufhellungsbehandlung zu verlängern oder eine Nachbesserung durchzuführen.

Das thixotrope Gel sorgt dafür, dass die Zähne gleichmäßig mit Bleaching-Gel bedeckt sind. Außerdem wird verhindert,

dass das Gel mit dem Zahnfleisch in Kontakt kommt.

Cavex Bite&White 3 Spritzen sind mit 16% Carbamid Peroxid (CP16= 6% Wasserstoffperoxid) für den europäischen Markt erhältlich.

Produktmerkmale

- 3 x 3 ml Cavex Bite&White Aufhellungsgel
- thixotropes Gel fließt unter Druck
- Aufhellungssitzungen von nur 30 bis 60 Minuten pro Tag
- drei Jahre haltbar (gekühlt)
- praktische, kompakte Verpackung
- Bedienungsanleitung enthalten



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW007	Cavex Bite&White 3 Spritze CP16	3 x 3 ml

CAVEX BITE&WHITE WHITENING PEN



Der Cavex Bite&White Whitening Pen ist ein unverzichtbares Bleaching-Tool, das immer und überall verwendet werden kann. Ob der Patient die Ober- und Unterkiefer Zähne bleachen möchte, oder einfach nur die schwer erreichbaren Stellen nachbehandeln möchte, der Cavex Whitening Pen kann alles.

Wie es funktioniert? Kappe abnehmen,

drehen (Klicksystem), bis auf der Unterseite des Stifts ein kleiner Tropfen Bleaching-Gel erscheint. Nun kann das Gel auf die Zähne gepinselt werden.

Produktmerkmale

- keine Kühlung erforderlich
- effektiv und sicher
- 6 % Hydrogenperoxid
- auslaufsicherer Stift



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW080	Cavex Bite&White Whitening Pen	1 x 2 ml

CAVEX BITE&WHITE PATIENT KIT



Das Cavex Bite&White Patienten-Kit war das erste Bleaching-Produkt, das Cavex entwickelte.

Vor der Verwendung des Cavex Patientenkits muß eine Bleachingschiene angefertigt werden damit das thixotrope Gel sich gleichmäßig auf den Zähnen verteilt.

Produktmerkmale

- 2 x 3ml Spritzen Cavex Bite&White Bleaching-Gel
- inklusive Aufbewahrungsbox
- inklusive Farbschlüssel
- bebilderte Anweisung für Patienten



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW000	Cavex Bite&White Patient Kit - 2 Spritzen CP16 Schienendose, Farbscala und Gebrauchsanw.	2 x 3 ml

CAVEX BITE&WHITE READY 2 USE



Cavex Bite&White Ready 2 Use ist ein professionelles Bleaching-Kit für zu Hause, das besonders einfach und sicher in der Anwendung ist. Diese zweite Generation von Ready 2 Use enthält das neue Wasserstoffperoxid Superior (HPS). Mit dem HPS-Gel erhält man schnell und effektiv in nur 15 Minuten an 8 Tagen ein gutes Ergebnis. Darüber hinaus ist das Produkt ohne Vorbereitungen gebrauchsfertig nutzbar und pH-neutral.

Cavex Bite&White Ready 2 Use ist temperaturstabil und muss nicht gekühlt werden. Zudem ist das Produkt sehr benutzerfreundlich. Im Gegensatz zu Systemen, bei denen die Schiene im Mund für eine

Stunde oder sogar eine ganze Nacht bleiben muss, ist die Tragezeit von Ready 2 Use nur 15 Minuten.

Produktmerkmale

- konstante Aufhellungsergebnisse mit 6 % Wasserstoffperoxid Superior (HPS)
- 8 universelle Bleachingschienen für 8 Tage bleichen
- Universalgröße, die gleichzeitig die oberen und unteren Zähne aufhellt
- HPS-Technologie: komplette Aufhellungsbehandlung in 8 Tagen
- nur 15 Minuten Tragezeit pro Tag
- stabil bei Raumtemperatur
- pH-neutral

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW031	Cavex Bite&White Ready 2 Use, 8 vorgefüllte Schienen	8 x 3 ml

CAVEX BITE&WHITE BARRIER/SPACER



Schützen Sie Bereiche, die nicht mit dem Bleachinggel in Kontakt kommen sollten, mit Cavex Bite&White Barrier/Spacer. Die blaue Farbe hebt sich gut ab, wodurch sie sehr genau aufgetragen werden kann.

Die Barriere lässt sich mit den mitgelieferten Spitzen einfach auftragen.

Nach nur 20 Sekunden ist Cavex Bite&White Barrier/Spacer bereits mit einer Polymerisationslampe ausgehärtet. Nach der Behandlung lässt sich das Gel sehr leicht entfernen.

Produktmerkmale

- auffallend blaue Farbe
- Aushärtungszeit von nur 20 Sekunden
- 2 x 1 ml Barrier/Spacer & 10 Tips

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
VT029	Cavex Bite&White Whitening Barrier/Spacer	2 x 1 gr
	Application tip	10 Stück

CAVEX BITE&WHITE STAINLESS

Cavex Bite&White StainLess ist eine stark reinigende, aber nicht abtragende Paste, die speziell entwickelt wurde, um optimale Bleachingergebnisse zu erzielen. Die Paste wird als Aktivator vor dem Aufhellungsgel im ABC Masterkit verwendet, ist aber auch separat erhältlich.

Die StainLess-Paste reinigt die Zähne gründlich und lässt das Bleaching-Gel direkt mit dem Zahnschmelz in Kontakt kommen.

Außerdem erhöht StainLess vorübergehend den pH-Wert im Mund, wodurch das Wasserstoffperoxid schneller wirkt.

Produktmerkmale

- reinigt die Zähne gründlich von Plaque und oberflächlichen Verschmutzungen
- erhöht den pH-Wert im Mund für optimale Bleachingbedingungen
- hat einen frischen, angenehmen Geschmack



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW070	Cavex Bite&White StainLess, Tube	10 x 50 gr / 35 ml
BW070-01	Cavex Bite&White StainLess, Tube	1 x 50 gr / 35 ml

CAVEX BITE&WHITE ALIGNER WHITENING PEN



Wenn ein Patient mit einer Aligner-Behandlung beginnt, kombinieren Sie diese mit dem Aligner Whitening Pen. So korrigiert der Patient seine Zahnstellung und hellt die Zähne gleichzeitig auf. Zwei Behandlungen in einer? Perfekt!

Die Magie des Aligner Whitening Pens liegt in seiner fortschrittlichen HPS-Technologie. Diese Technologie nutzt reines Wasserstoffperoxid in einem wasserbasierten Gel, das sicher und effektiv in Kombination mit Alignern angewendet werden kann. Beim Kontakt des Gels mit Zähnen und Speichel zerfällt das Wasserstoffperoxid in Sauerstoff, Wasser und freie Radikale. Diese freien Radikale beseitigen Verfärbungen, indem sie die chemischen Bindungen aufbrechen, die für die Flecken verantwortlich sind. Das Ergebnis? Strahlend weiße Zähne – Tag für Tag.

Produktmerkmale

- Einfache Anwendung dank des stiftförmigen Designs: Der Patient kann das Gel präzise auf die zu bleichenden Zähne auftragen.
- Sicher für die regelmäßige Anwendung: Das Gel enthält weniger als 3 % hochwertiges Wasserstoffperoxid.
- Doppelbehandlung: Kombinieren Sie die Aligner-Therapie mit einer professionellen Zahnaufhellung.
- Flexible Anwendungsdauer: Das Gel kann je nach persönlicher Vorliebe 20 Minuten bis maximal 2 Stunden pro Tag angewendet werden. Keine Behandlungszeiten in der Praxis: Der Patient führt die Zahnaufhellung selbstständig zu Hause durch.
- Praktische Aufbewahrung: Das Gel kann bei Raumtemperatur gelagert werden.



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW082	Cavex Bite&White Aligner Whitening Pen	1 x 6 ml



CAVEX HEALTHYPOPS

Cavex Healthypops bekämpfen Mundtrockenheit. Healthypops sind das ideale Mittel, um Xerostomie in der Zahnarztpraxis zu besprechen. Darüber hinaus unterstützen die Lollies Patienten bei der Mundpflege und sie eignen sich sehr gut als verantwortungsvoller Snack!

Cavex Healthypops enthalten keinen Zucker, Gluten, Milchprodukte, Soja, Nüsse oder zugesetzte Duft- und Geschmacksstoffe. Dies macht die Lutscher sicher für Diabetiker.

Geschmacksrichtung:

Kirsche – zur Befeuchtung des Mundes bei Xerostomie

Produktmerkmale

- Lutscher ohne Zucker, aber mit dentaler Funktion
- erhältlich in den Geschmacksrichtungen Kirsche
- hilft gegen Mundtrockenheit
- enthält keinen Zucker, Gluten, Milchprodukte, Soja, Nüsse oder zugesetzte Duftstoffe und Aromen
- für Diabetiker geeignet

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW900	Cavex Healthypops Cherry	60 x Lollipop (454 gr)



CAVEX RUSH BRUSH

Mit Cavex Rush Brush können Patienten ihre Zähne einfach und schnell unterwegs oder vor einer Behandlung putzen. Die Zahnbürste ist sofort einsatzbereit. Der Patient benötigt keine Zahnpasta. Die Bürste ist unsichtbar mit frischer, fluoridfreier Zahnpasta beschichtet.

Der kleine Bürstenkopf erreicht jede Stelle im Mund und die weichen, abgerundeten Borsten schonen das Zahnfleisch.

Zudem ist die Zahnbürste hygienisch in einer Einzelverpackung verpackt. Dadurch lässt sich die Bürste überall leicht mitnehmen.

Produktmerkmale

- mit Zahnpasta imprägniert, gebrauchsfertig
- frischer Minzgeschmack
- weiche Bürste
- kleiner Bürstenkopf für eine gründliche Reinigung

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
HA090	Cavex Rush Brush 100 Stück pro Box (rot, grün, gelb und blau 25 je Farbe)	10 x 100 Stück



CAVEX BOIL&BITE

Cavex Boil&Bite ist eine doppelseitige thermoplastische (Cook & Bite) Schiene zur Anpassung an das Gebiss. Diese Schiene hat oben und unten Bereiche, die je nach Bedarf gefüllt werden können. Die revolutionäre Schiene ist im Mund gut verträglich und für jeden geeignet!

Das Cavex Boil&Bite kann sowohl von Zahnärzten als auch von den Patienten selbst

verwendet werden, was bedeutet, dass Cavex Boil&Bite sich gleichermaßen für die Behandlung in der Zahnarztpraxis sowie für den Heimgebrauch eignet.

Produktmerkmale

- ideale Kombination mit Cavex ExSense
- Behandlung von Zahnpfempfindlichkeit
- für den Einsatz in der Zahnarztpraxis und zu Hause
- acht Schienen in einer Box

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW085	Cavex Boil&Bite	8 Stück

CAVEX EXSENSE



Cavex ExSense sorgt für mehr Komfort bei empfindlichen Zähnen und bietet dank der Zugabe von 2 % Hydroxylapatit und 0,1 % Kaliumnitrat eine langanhaltende Pflege.

Erhältlich in zwei Varianten:

Tube – Ideal für größere Anwendungen, z. B. zur Abdeckung aller Zähne oder zur Verwendung in einer Bleichschiene nach dem Bleichen.

NEU

Pinsel-Pen – Kompakt und praktisch für unterwegs, einfach lokal auf empfindliche Bereiche aufzutragen.

Produktmerkmale

- Hydroxyapatit pflegt die Zahnoberfläche und gleicht kleine Unebenheiten aus.
- unterstützt das Wohlbefinden empfindlicher Zähne.
- trägt zur Remineralisierung bei.
- angenehmer Minzgeschmack.

Art. Nr.	Description	Content
BW160	Cavex Bite&White ExSense, Tube	1 x 50 gr / 42 ml
BW062	Cavex Bite&White ExSense Pinsel-Pen	12 x 6 ml





CAVEX FRESH4SURE

NEU

Fresh4Sure ist die Mundspülung für die tägliche Anwendung – die perfekte Ergänzung zum Zähneputzen und zur Zahnzwischenraumreinigung. Leidet der Patient unter Mundgeruch oder Mundtrockenheit? Fresh4Sure bietet sofortige Linderung. Spülen Sie einmal täglich nach dem Zähneputzen 30 Sekunden lang mit 10 ml und erleben Sie sofort einen frischen, angenehmen Mund.

Cavex hat Fresh4Sure mit Sorgfalt entwickelt: keine Standardformel, sondern sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe für optimale Leistung.

Produktmerkmale

- lindert Mundtrockenheit
- hilft bei Mundgeruch
- 50 Spülungen pro Flasche
- Flasche mit integriertem Messbecher
- Frischer Geschmack dank Menthol und Eukalyptol
- Enthält keinen Alkohol, kein SLS und kein Chlorhexidin.

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
MW010	Fresh4Sure Mouthwash	6 x 500 ml
MW010-01	Fresh4Sure Mouthwash	1 x 500 ml



CAVEX ORAL PRE RINSE

Cavex hat Oral Pre Rinse entwickelt, indem es wissenschaftliche Informationen mit jahrelanger Erfahrung auf dem Gebiet von Wasserstoffperoxid und Mundspüllösung kombiniert hat. Cavex Oral Pre Rinse ist eine präoperative Mundspüllösung mit 1,5% stabilisiertem Wasserstoffperoxid. Indem der Patient vor der Behandlung 30 bis 60 Sekunden lang spült, wird die Wahrscheinlichkeit der Verbreitung von (Corona-)Viren und Bakterien stark reduziert.

Der Zusatz von Glycerin beugt Mundtrockenheit vor. Cavex Oral Pre Rinse hat einen leicht süßlichen Minzgeschmack, der das Spülen für den Patienten angenehm macht.

Produktmerkmale

- Mundspüllösung vor dem Eingriff
- enthält 1,5 % stabilisiertes Wasserstoffperoxid
- inaktiviert Viren, einschließlich COVID-19
- sofort einsatzbereit
- Wirksam in 30-60 Sekunden
- patientenfreundlich durch angenehmen Minzgeschmack
- 500 ml für ca. 50 Spülgänge
- Flasche mit integriertem Dosierbecher

Cavex Oral Pre Rinse enthält ein Bioadhäsiv für die ideale Viskosität und Schaumbildung. Das zugesetzte Erythrit wirkt antibakteriell und verstärkt die Reinigungswirkung.

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
MW001	Cavex Oral Pre Rinse	6 x 500 ml
MW001-01	Cavex Oral Pre Rinse	1 x 500 ml

CAVEX PROPHY PASTE



Verfärbungen, Plaque und Bakterien tragen wesentlich zur Entstehung von Gingivitis, Parodontitis und Karies bei. Daher ist die professionelle Entfernung ein wichtiger Bestandteil der Erhaltung einer guten Mundgesundheit. Cavex PropyPaste wurde speziell dafür entwickelt. Dazu haben wir uns unsere Kenntnisse in der Herstellung von Pasten zu Nutze gemacht und bieten somit ein hervorragendes Produkt für die prophylaktische Behandlung an. Bei der Entwicklung der Polierpaste haben wir bewusst auf die Nutzung von Mikroplastik verzichtet. Stattdessen entschieden wir uns für ein natürliches Mittel in Form von Kieselgel. Durch die besondere Mischung verschiedener Kieselgelkörner ist die Paste hochwirksam bei der Entfernung von Ablagerungen und Verfärbungen. Cavex PropyPaste ist mit zwei verschiedenen RDA-Eigenschaften erhältlich: Regular und Fine.

Cavex PropyPaste Regular hat eine höhere Abrasivität mit einem RDA-Wert von 130 bis 150. Daher ist es perfekt für eine gründliche Reinigung und behält gleichzeitig ein glattes Finish bei. Sie hat eine grüne Farbe mit einem erfrischenden Minzgeschmack.

Cavex PropyPaste Fine hat eine geringere Abrasivität mit einem RDA-Wert von 50 bis 60. Daher ist sie perfekt für die schonende Reinigung mit hoher Polierwirkung und sehr gut geeignet für den Einsatz auf Implantaten, Kronen und Brücken. Sie hat eine rosa Farbe mit einem angenehmen Cranberry-Geschmack.

Produktmerkmale

- Sicher und effektiv
- Enthält Fluorid
- pH-neutral
- Ideale Konsistenz, kein Spritzen
- Tubeninhalt 100g (60ml)



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BW910	Cavex PropyPaste regular	100g (60ml)
BW911	Cavex PropyPaste fine	100g (60ml)





QUADRANT UNIVERSAL LC

Quadrant Universal Living Colors (QULC) ist ein universelles Hybrid-Komposit, angereichert mit Submikron-Partikeln. Aufgrund dieser einzigartigen und ausgewogenen Zusammensetzung ist QULC einfach zu applizieren und sehr einfach zu verarbeiten. Die Komposit-Füllung lässt sich gut modellieren, klebt nicht an Instrumenten und lässt sich zudem auf Hochglanz polieren. Das Produkt enthält ein einzigartiges fluoreszierendes Pigment, ähnlich echter Zahnschmelze. Dadurch verleiht QULC den Zähnen ein natürliches und lebendiges Aussehen.

Produktmerkmale

- optimale Lichtstreuung durch prismenförmige Füllpartikel
- perfekte Füllstoffmischung, angereichert mit Submikron-Partikeln
- geeignet für Monoschicht- und Mehrschichttechnik
- perfekter Chamäleon-Effekt
- langlebig und verschleißfest
- natürliche Fluoreszenz
- Röntgenopak
- BPA-frei (Bisphenol A)

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
FU02	Quadrant Universal LC starterkit syringes Inhalt: 5 x 4 g (A1, A2, A3, A3.5, A4) + Uni-SE-Bond + Farbschlüssel & Zubehör	1 Set
FU20	Quadrant Universal LC syringe A1	4 gr
FU21	Quadrant Universal LC syringe A2	4 gr
FU22	Quadrant Universal LC syringe A3	4 gr
FU23	Quadrant Universal LC syringe A3.5	4 gr
FU28	Quadrant Universal LC syringe A4	4 gr
FU24	Quadrant Universal LC syringe B2	4 gr
FU29	Quadrant Universal LC syringe B3	4 gr
FU25	Quadrant Universal LC syringe C2	4 gr
FU30	Quadrant Universal LC syringe C3	4 gr
FU26	Quadrant Universal LC syringe OA2	4 gr
FU27	Quadrant Universal LC syringe Incisal	4 gr
FU60	Quadrant Universal LC capsule A1	20 x 0,25 gr
FU61	Quadrant Universal LC capsule A2	20 x 0,25 gr
FU62	Quadrant Universal LC capsule A3	20 x 0,25 gr
FU63	Quadrant Universal LC capsule A3.5	20 x 0,25 gr
FU64	Quadrant Universal LC capsule B2	20 x 0,25 gr
FU65	Quadrant Universal LC capsule C2	20 x 0,25 gr
Zubehör für Quadrant Universal LC		
FG73	Farbschlüssel Quadrant Universal LC 11 Farben	1 Stück
FG57	Quadrant Einweg Mischschälchen	25 Stück



QUADRANT ANTERIOR SHINE



Stellen Sie die gesunde, natürliche Ausstrahlung Ihrer Patienten mit dem lichthärtenden Mikro-Hybrid-Komposit Quadrant Anterior Shine wieder her. Die glänzende, leicht zu polierende Oberfläche und die natürliche Fluoreszenz machen es schwer die Restauration vom Original zu unterscheiden. Die langlebige Eigenschaft dieses Mikro-Hybrid-Verbundwerkstoffes garantiert eine verschleiß- und bruchfeste Oberfläche. Außerdem ist das Komposit aufgrund der geringen Flüssigkeitsaufnahme farbecht.

Produktmerkmale

- Bariumglas-Technologie
- hochglanzpolierbar
- natürliche Fluoreszenz
- perfekter Chamäleon-Effekt
- Schwarzlichteffekt
- hohe Elastizität
- hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- thixotrop
- farbstabil
- hohe Bruchfestigkeit
- klebt nicht an Instrumenten
- BPA-frei (Bisphenol A)



Quadrant Anterior Shine ist eine perfekte Kompositfüllung für:

- Frontzahnrestauration
- Behandlungen von Schmelzdefekten
- Verfärbungen
- Positionskorrekturen
- Schließen von Diastema mediale

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
FA60T	Quadrant Anterior Shine capsule A1	20 x 0,25 gr
FA61	Quadrant Anterior Shine capsule A2	20 x 0,25 gr
FA62T	Quadrant Anterior Shine capsule A3	20 x 0,25 gr
FA63	Quadrant Anterior Shine capsule A3.5	20 x 0,25 gr
FA64T	Quadrant Anterior Shine capsule A4	20 x 0,25 gr
FA65T	Quadrant Anterior Shine capsule B2	20 x 0,25 gr
FA66	Quadrant Anterior Shine capsule B3	20 x 0,25 gr
FA67T	Quadrant Anterior Shine capsule C2	20 x 0,25 gr
FA68T	Quadrant Anterior Shine capsule C4	20 x 0,25 gr
FA69T	Quadrant Anterior Shine capsule D3	20 x 0,25 gr
FA70	Quadrant Anterior Shine capsule Incisal	20 x 0,25 gr
FA71T	Quadrant Anterior Shine capsule OA2	20 x 0,25 gr
FA72T	Quadrant Anterior Shine capsule OA3.5	20 x 0,25 gr
FA73T	Quadrant Anterior Shine capsule Dark Shade	20 x 0,25 gr
FA74T	Quadrant Anterior Shine capsule Bleach	20 x 0,25 gr

Zubehör für Quadrant Anterior Shine

FG57	Quadrant Einweg Mischschälchen	25 Stück
------	--------------------------------	----------





QUADRANT QUAST

Quadrant Quast oder „Quadrant Anterior Shine-Tool“ ist ein speziell ausgewählter Pinsel für das präzise Auftragen und Verteilen von Quadrant Anterior Shine. Diese revolutionäre Bürste führt zu überlegenen Verbundstoff-Verblendungen. Cavex hat Quadrant Quast in Zusammenarbeit mit dem Zahnarzt und Meinungsführer Hein de Kloet entwickelt.

Produktmerkmale

- speziell entwickelter Pinsel zum Auftragen und Verteilen von Quadrant Anterior Shine
- entwickelt in Zusammenarbeit mit Hein de Kloet
- für hochwertige Komposit-Veneers

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
FF30	Quadrant Anterior Shine Tool (QUAST)	12 Stück



QUADRANT FLOW

Quadrant Flow ist ein fließfähiges, lichterhärtendes Komposit. Es ist ein vielseitiges Produkt, das für verschiedene Behandlungen verwendet wird. Dank der kleinen Spritzen und der mitgelieferten Tips kann das Komposit sofort aufgetragen werden. Quadrant Flow ist mit allen modernen Verbundsystemen kompatibel. Das einzigartigste Merkmal des Produkts ist seine thixotrope Beschaffenheit. Es fließt leicht, ist aber nicht flüssig.

Produktmerkmale

- einfach anzuwenden
- erhältlich in vier Farben
- Bariumglas-Technologie
- minimalinvasive Kompositfüllung
- kompatibel mit anderen Verbundmaterialien
- thixotrop
- Lagerfähigkeit drei Jahre
- BPA-frei (Bisphenol A)
- Lichthärtung
- röntgenopak

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
FD09	Quadrant Flow A2 syringe + 5 tips	1,8 gr / 1 ml
FD10	Quadrant Flow A3 syringe + 5 tips	1,8 gr / 1 ml
FD11	Quadrant Flow A3.5 syringe + 5 tips	1,8 gr / 1 ml
FD12	Quadrant Flow OA2 syringe + 5 tips	1,8 gr / 1 ml



QUADRANT TOTAL ETCH

Quadrant Total Etch ist ein 35 %iges Phosphorsäure-Gel für die Total-Etch-Technik.

Produktmerkmale

- die ideale Konzentration für die gesamte Ätztechnik
- Glasur ist optimal vorbereitet
- keine übermäßige Demineralisierung des Dentins
- sichtbare blaue Farbe
- perfekte visuelle Kontrolle über den Ätzprozess
- einfache Rückstandserkennung
- hervorragende Basis für Klebeverbindungen
- vollständige Hybridisierung der freigelegten Kollagenfibrillen

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
FE10	Quadrant Total Etch + 10 Tips	2,5 ml
FG55	Tips Quadrant Total Etch	10 pcs

QUADRANT UNI-SE-BOND

Quadrant Uni-SE-Bond ist ein selbststän-
zendes Bondingsystem der siebten Gen-
eration. Das System kann mit lichthärten-
den Restaurationsmaterialien kombiniert
werden. Ein einzigartiger Desensibilisator
verhindert postoperative Empfindlichkeiten.

Produktmerkmale

- starke und dauerhafte Bindung durch 4-META und milde Ätzung
- eingebauter Desensibilisator verhindert Empfindlichkeiten
- sehr einfaches Verfahren
- dringt tief in die Oberfläche ein
- kann bei Raumtemperatur gelagert werden

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
FB20	Quadrant Uni-SE-Bond	4 ml



QUADRANT UNI1BOND

Quadrant Uni-1-Bond ist ein Primer und
Sealer in einer Flasche kombiniert für
direkte Restaurationen. Das lichthärtende
Komposit-Adhäsiv hat aufgrund des
4-META-Monomers eine hervorragende
Haftfestigkeit.

Produktmerkmale

- Qualität durch 4-META-Monomer
- hervorragende Haftfestigkeit
- gute Penetration im Dentin
- verhindert das Eindringen von Bakterien
- Ethanolbasis auf Wasserbasis
- konstante Zusammensetzung
- weniger techniksensibel
- einfach zu handhaben
- Befeuchungskapazität

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
FB30	Quadrant Uni-1-Bond	4 ml



QUADRANT FINISENSE

Quadrant FiniSense ist ein schneller und
wirksamer Desensibilisator. Die Flüssigkeit
hilft bei empfindlichem, freiliegendem
Dentin. Darüber hinaus lindert es postop-
erative Schmerzen nach Kronen- und
Inlaypräparation bereits nach 30 Sekunden.
Eine Flasche enthält genug Flüssigkeit für
ca. 150 Anwendungen.

Produktmerkmale

- aus transparentem Acryl
- 14 Öffnungen für Komposit-Spritzen
- eingebauter Applikatorenspender mit einzigartigem Drehsystem. Bei jeder Umdrehung wird jeweils ein Applikator freigegeben; praktisch und hygienisch
- kann im Thermodesinfektor gereinigt werden

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
FS10	Quadrant FiniSense	5 ml



QUADRANT Q-SYSTEMISER SYRINGES



**Funktionales Aufbewahrungssystem für
Spritzen und Zubehör.**

Produktmerkmale

- aus transparentem Acryl
- 14 Öffnungen für Komposit-Spritzen
- eingebauter Applikatorensponder mit einzigartigem Drehsystem. Bei jeder Umdrehung wird jeweils ein Applikator freigegeben; praktisch und hygienisch
- kann im Thermodesinfektor gereinigt werden

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
FG41	Quadrant Q-Systemiser Syringes	1 Stück

QUADRANT Q-BRUSHES XL




Die Quadrant Q-Brushes XL sind blaue Einweg-Applikatoren zum Auftragen von u.a. Primer, Bonding und Desensitizer. Die Applikatoren können in verschiedene Positionen gebogen werden. Einmal gebogen, bleiben die Applikatoren in dieser Position. Die Applikatoren sind extra groß, wodurch das Auftragen einer großen Menge Flüssigkeit einfach ist.

Produktmerkmale

- zum Auftragen von Ätzel, Bonding und Desensitizer
- Applikatoren können in verschiedene Positionen gebogen werden
- die Bürste bleibt in der gewünschten Position
- XL-Größe

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
FF21	Quadrant Q-brushes XL, für den Einmalgebrauch	100 Stück
	brushes for single use	

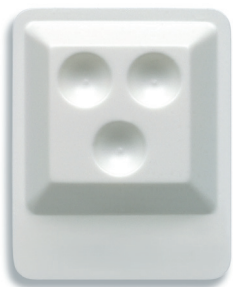

QUADRANT ZUBEHÖR

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
FG73	Farbring Quadrant Universal LC 11 Farben	1 Stück
FG55	Tips Total Etch	10 Stück
FG57	Einweg Mischschälchen	25 Stück



CAVEX SET UP WAX

Cavex Set Up Wax ist ein Modellierwachs der Extraklasse. Das Wachs ist in **Soft, Regular, Hard und Extra Hard** erhältlich. Die Verarbeitung ist identisch, aber der Schmelzpunkt und die Endhärte variieren. Neben diesen Varianten ist das Wachs nun auch in **Regular Flex** erhältlich. Diese Variante zeichnet sich durch zusätzliche Flexibilität in der Wärmeübertragung aus, damit es nun für jeden Techniker ein **Cavex Set Up Wax** gibt, welches perfekt für die Verarbeitung des Wachses abgestimmt ist.

Die Set Up Wachs-Platten fallen groß aus und reichen in der Regel für zwei Prothesen. Neben dem Aufbau des Bisswalls wird Cavex

Zahnwachs auch als Box-Wachs verwendet, da es gut am Löffel haftet. Aufgrund seiner idealen Konsistenz wird dieses Wachs beim Zahnarzt gerne als Bissregistrator verwendet. Eine Prothese soll nicht nur schön sein, sondern auch perfekt passen. Daher bleibt das Wachs in den Händen des Zahntechnikers lange genug plastisch, um es wie gewünscht zu verarbeiten.

Produktmerkmale

- für Voll- und Teilprothesen
- geringe Schrumpfspannung
- formstabil
- plastisch und elastisch
- Modellier- und Boxing Wachs



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
WA004	Cavex Set Up Soft 500 gr, 23 Platten	500 gr
WA005	Cavex Set Up Regular 500 gr, 23 Platten	500 gr
WA002	Cavex Set Up Regular Flex 500 gr, 23 Platten	500 gr
WA006	Cavex Set Up Hard 500 gr, 23 Platten	500 gr
WA008	Cavex Set Up Extra Hard 500 gr, 23 Platten	500 gr
WA015	Cavex Set Up Regular 2500 gr, 115 Platten	2500 gr
WA016	Cavex Set Up Hard 2500 gr, 115 Platten	2500 gr

CAVEX YELLOW WAX

Cavex Yellow Wax ist eine weichere Variante. Diese ist noch einfacher zu modellieren. Ideal zum Beseitigen von Unterschneidungen und dem Anpassen von Abformlöffelrändern.

Produktmerkmale

- für Anpassungen des Abdrucklöffels
- zum Ausblocken von Unterschneidungen
- flexibel, einfach zu modellieren
- wirtschaftlich
- Lagerfähigkeit 5 Jahre



Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
WB006	Cavex Yellow Wax	17 Platten

CAVEX BASEPLATES



Cavex Basisplatten sind die zuverlässigste Basis für eine perfekt sitzende Prothese. Schellack ist einer der natürlichen Inhaltsstoffe des Produkts. Dank der, im Laufe der Jahre perfektionierten, Technologie von Cavex, kann aus einem zweidimensionalen Bild ein äußerst stabiles, dreidimensionales Modell geformt werden.

Die rosa Platte (Standardstärke 1,4 mm), lässt sich nach kurzem Erhitzen in der Flamme gut auf dem Gipsmodell anformen und ist leicht zu schneiden.

Die 'Mica-free'-Variante führt zu einer weiteren Leistungssteigerung der Cavex Basisplatten.

Das zugesetzte Aluminiumhydroxid sorgt dafür, dass ab 200°C kühlendes Kristallwasser freigesetzt wird. Dadurch wird ein Verbrennen der Platte verhindert. Außerdem ist das Endergebnis glatter, porenfrei und schön glänzend, genau wie der spätere Prothesenkunststoff.

Produktmerkmale

- Zwischenprodukt zur Herstellung von Prothesen
- einfache Technik
- stark und formstabil
- standardisierte Dicke
- keine Verzerrung bei Mundtemperatur
- Formstabil
- Verpackt zu 100 Stück
- auch in 'Mica-free' erhältlich

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BP004	Cavex BaseSchienen Oberkiefer	100 Stück
BP054	Cavex BaseSchienen Unterkiefer	100 Stück
BP024	Cavex BaseSchienen Unterkiefer, doppelt dick 2.70 - 2.80 mm	50 Stück
BP005	Cavex BaseSchienen mica-free Oberkiefer	100 Stück
BP055	Cavex BaseSchienen mica-free Unterkiefer	100 Stück

CAVEX LC DENTAL TRAY



Der Cavex Light Curing Dental Tray ist ein lichthärtendes Kunstharz-Plattenmaterial zur Herstellung von individuellen oder funktionellen Abformlöffeln. Das Material eignet sich auch zur Herstellung von Basisplatten für Wax-Ups und für Bisschablonen.

Das Cavex LC Dental Tray zeichnet sich unter anderem durch seine extrabreite Form aus. Das lästige Aufkleben von Stücken gehört nun der Vergangenheit an. Zudem ist das Material einfach zu verarbeiten.

Das Material kann mit Halogen und UV gehärtet werden. Nach der richtigen Aushärtung ist das Material formstabil.

Produktmerkmale

- lichthärtendes Löffelmaterial
- härtet in 3 bis 5 Minuten mit Halogen oder UV aus
- eine breite Form
- Lagerfähigkeit drei Jahre
- 50 Platten pro Packung

Art. Nr.	Bezeichnung	Inhalt
BP010	Cavex LC Dental Tray	50 Stück

CAVEX GLASS IONOMER CEMENT

Cavex Glass Ionomer Cement ist ein Zement zum Einsetzen von Kronen, Brücken und Inlays. Bereiten Sie den Zement vor, indem Sie nach und nach kleine Mengen Pulver in die Flüssigkeit einarbeiten und kräftig mischen. Pulver und Flüssigkeit sind so zusammengesetzt, dass nach dem Anmischen ein Zement mit ästhetischen Eigenschaften entsteht.

Produktmerkmale

- biokompatibel
- guter Verbund mit Zahngewebe
- benutzerfreundliche Aushärtezeit
- hohe Druck- und Zugfestigkeit
- röntgendicht
- keine Übersäuerung möglich
- Lagerfähigkeit 5,5 Jahre



Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
CE020	Cavex Glass Ionomer Cement	
	Puder	35 gr
	Flüssigkeit	15 ml
	Messlöffel	1 Stück

CAVEX TEMPORARY CEMENT



Ein provisorischer Zement muss zuverlässig sein und wirksamen Schutz bieten. Außerdem sollte er sich leicht auftragen und rückstandslos entfernen lassen. Cavex hat die ideale Lösung entwickelt, um diese Anforderungen zu erfüllen:

Cavex Temporary Cement.

Die Eigenschaften des Zements sind perfekt zum zementieren von provisorischen Kronen und Brücken. Cavex Temporary Cement ist anwenderfreundlich, geruchlos, ästhetisch ansprechend und zudem frei von Eugenol.

Produktmerkmale

- einfach anzuwenden
- Eugenolfrei
- auffällige Farbe
- perfekte Abdichtung
- geringe Löslichkeit
- kurze Aushärtezeit
- leicht zu entfernen



Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
CE090	Cavex Temporary Cement	
	Base	35 gr
	Catalyst	16 gr
	Anmischblock	1 Stück



Haftungsausschluss

Vor der Veröffentlichung von Informationen in diesem Katalog hat Cavex alle angemessenen Anstrengungen unternommen, um seinen Inhalt sorgfältig zu prüfen und zu aktualisieren. Cavex garantiert jedoch weder, dass die in diesem Katalog enthaltenen Informationen stets aktuell, genau oder vollständig sind, noch dass diese Informationen frei von geistigen Eigentumsrechten oder Urheberrechten Dritter sind. Eine Haftung von Cavex für Schäden, welcher Art auch immer, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der in diesem Katalog bereitgestellten Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, wird hiermit ausgeschlossen, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Alle Angebote in diesem Katalog sind freibleibend und unverbindlich.

Die Informationen in diesem Katalog können Spezifikationen oder allgemeine Beschreibungen technischer Eigenschaften von Produkten enthalten. Schließt ein Nutzer von Cavex einen Vertrag über Produkte ab, die in diesem Katalog beschrieben oder abgebildet sind, so sind ausschließlich die zwischen dem Nutzer und dem Geschäftsbereich von Cavex in diesem Vertrag vereinbarten Spezifikationen verbindlich.

Urheberrecht, Rechte an geistigem Eigentum

Alle in diesem Katalog veröffentlichten Informationen, Daten und sonstigen Inhalte (einschließlich Bild-, Grafik- und Fotoarbeiten), die markenrechtlich, urheberrechtlich oder durch sonstige Immaterialgüterrechte geschützt sind, sind auch für den jeweiligen Rechteinhaber gesetzlich geschützt, auch wenn diese nicht ausdrücklich als so geschützt gekennzeichnet sind. Die in diesem Katalog veröffentlichten Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Cavex mit Ausnahme der Kontaktadressen nicht kopiert, verbreitet, verändert, Dritten zugänglich gemacht oder anderweitig verwendet werden.

Rechtswirksamkeit

Dieser Haftungsausschluss ist Bestandteil dieses Katalogs. Wenn ein Begriff oder Satz dieses Haftungsausschlusses nicht dem geltenden Recht entspricht, wird dieser Begriff oder Satz vom Rest dieses Haftungsausschlusses getrennt, und dieser Rest bleibt in vollem Umfang in Kraft und Wirksamkeit bestehen.



**YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY**

Im Spiet 101 | 26506 Norden | Germany | cavex-deutschland.de

CAVEX

ZY200E.17DE